

**WOOLWORTH®**

**Nacken- und  
Rückenwärmekissen**

EU-HP2421(63\*42)



Bedienungsanleitung

**WOOLWORTH®**

## **Sicherheitshinweise:**

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie gibt wichtige Hinweise für die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung des Gerätes.

**ACHTUNG!** Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn

- es sichtbare Schäden oder Funktionsstörungen aufweist
- es ein beschädigtes Netzkabel oder Netzstecker hat
- es nass geworden ist
- Ein beschädigtes Netzkabel darf ausschließlich von einer Fachkraft(\*) ausgewechselt werden, um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden. Für Reparaturen wenden Sie sich an eine Fachkraft (\*).

*(\*)Fachkraft: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.*

- Sollten Sie Träger eines Herzschrittmachers oder Diabetiker sein, befragen Sie bitte Ihren Arzt vor Benutzung des Produktes um Erlaubnis.

**WOOLWORTH®**

- Die von dem Produkt ausgehenden elektrischen und magnetischen Felder liegen unter den staatlich bestimmten Grenzwerten, könnten aber unter Umständen die Funktion von Herzschrittmachern beeinträchtigen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht an verletzten, entzündeten oder geschwollenen Körperstellen. Im Zweifelsfall holen Sie vor der Benutzung ärztlichen Rat ein.
- Das Produkt nicht bei Kleinkindern verwenden.
- Das Wärmekissen nicht bei hilflosen und/oder wärmeunempfindlichen Personen verwenden. Sie könnten sich bei zu langer Benutzung verbrennen.
- Das Wärmekissen darf nicht zum Wärmen von Tieren benutzt werden. Denn sie könnten das Netzkabel oder andere stromführende Teile zerbeißen und einen Stromschlag erleiden.
- Das Produkt muss stets an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Produktes übereinstimmen um Überhitzen und Kurzschluss zu vermeiden.

**WOOLWORTH®**

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht zusammen mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem, dafür ist es nicht vorgesehen und dies kann Brandgefahr verursachen.
- Verwenden Sie, falls nötig, ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Produktes übereinstimmen.
- **Der Netzstecker ist zu ziehen:**
  - wenn das Wärmekissen, Netzkabel oder Bedienteil Schäden aufweisen
  - bei Störung während des Betriebs
  - nach dem Gebrauch
  - vor jeder Reinigung und Pflege
- Als zusätzlicher Schutz vor Gefahren durch elektrischen Strom wird der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Haushaltsstromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektro-Installateur um Rat.
- Ziehen Sie den Netzstecker wenn Sie das Produkt nicht benutzen und bevor Sie das Produkt reinigen. Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel anfassen.

**WOOLWORTH®**

- Das Wärmekissen niemals am Netzkabel tragen. Netzkabel nicht knicken um Schäden am Netzkabel zu vermeiden. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Netzkabel nicht beschädigt ist. Bei Beschädigung des Netzkabels oder des Produktes dürfen diese keinesfalls mehr benutzt werden.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand daran ziehen kann und dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung und lassen Sie es nicht über den Rand oder Ecken von Möbeln hängen. Es könnte beschädigt werden.
- Produkt nicht in die Nähe einer Wärmequelle wie elektrischen Herd, Gasheizung oder Ofen legen.
- **Achtung Verbrennungsgefahr! Bei eingeschaltetem Wärmekissen niemals einschlafen. Allzulange Anwendung kann Hautverbrennungen verursachen!**
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es feucht geworden ist. Lassen Sie es komplett trocknen.
- Keine Nadeln oder spitzen Gegenstände in das Wärmekissen stecken.

**WOOLWORTH®**


- Benutzen Sie das Wärmekissen nicht, wenn es zusammengeschoben oder zusammengefaltet ist. Vermeiden Sie zu starkes Abknicken und Durchbiegen des Produktes um Schaden zu vermeiden.
- Das Wärmekissen darf nur mit dem mitgelieferten Bedienteil betrieben werden. Platzieren Sie das Bedienteil immer so, dass er leicht zugänglich ist.
- Das Wärmekissen ist vor jeder Benutzung dahingehend zu prüfen, ob es Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt. Falls Abnutzungen oder Beschädigungen festzustellen sind, darf das Wärmekissen nicht mehr verwendet werden!
- Verwenden Sie das Wärmekissen nur für den Hausgebrauch/Innenbereich.
- Befestigen Sie das Wärmekissen nur mit den vorgesehenen Verschlüssen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe eines Waschbeckens oder einer Badewanne damit es nicht hineinfallen kann.
- Ziehen Sie nicht an dem Netzkabel und verdrehen Sie es nicht, wenn Sie das Wärmekissen benutzen.
- Lassen Sie das Produkt während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt.

**WOOLWORTH®**

- Das Produkt darf nicht von/bei Kleinkindern jünger als drei Jahre benutzt werden, da sie unfähig sind, auf eine Überhitzung zu reagieren.
- Wählen Sie den Standort Ihres Produktes so, dass Kinder keinen Zugriff auf das Produkt haben. Benutzen und lagern Sie das Produkt nur außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Aufgrund von Verletzungs- und Erstickenungsgefahr, keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, etc.) für Kinder oder Tiere erreichbar liegen lassen.
- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und seine Schnur aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

**WOOLWORTH®**

## Detailbeschreibung

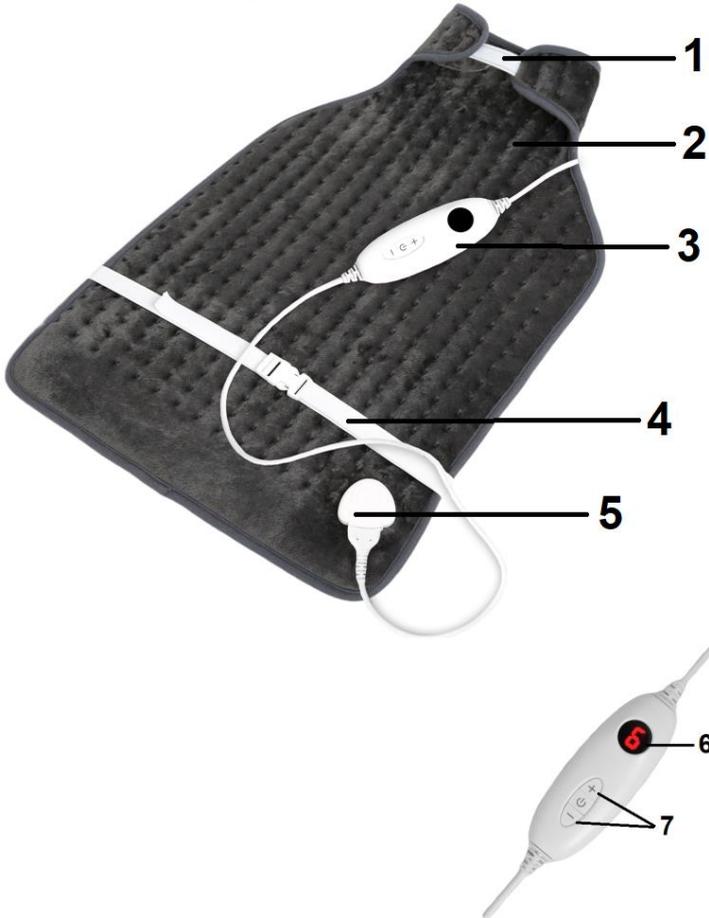

- 1: Klettverschluss (Nackebereich)
- 2: Wärmekissen
- 3: Bedienteil mit Betriebskontrollleuchte
- 4: Elastischer Verschluss
- 5: Anschlussbuchse
- 6: Betriebsanzeige
- 7: Wärmestufenregler:
  - 0 = Aus
  - 1 = minimale Wärme
  - 6 = maximale Wärme

# WOOLWORTH®

## VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie alle Schutzfolien und Verpackungsteile. Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam.
- Versichern Sie sich, dass das Wärmekissen nicht gefaltet oder geknickt ist, bevor Sie es zum ersten Mal einschalten.
- Anfangs kann ein leichter Geruch vorhanden sein. Dieser ist jedoch harmlos und verfliegt nach einiger Zeit.

## Achtung Verbrennungsgefahr!


Beim Umgang mit Wärmeprodukten besteht Verbrennungsgefahr. Bei eingeschaltetem Wärmekissen nicht einschlafen, um Hautirritationen oder Verbrennungen zu vermeiden!

## Achtung Überhitzungsgefahr!

Die elektronischen Bauteile im Bedienteil können sich während des Betriebs erwärmen. Das Bedienteil und das Netzkabel dürfen deshalb niemals auf oder unter dem Wärmekissen liegen oder durch Decken, Kissen oder ähnliches bedeckt sein um Überhitzung zu vermeiden.

## BEDIENUNGSANLEITUNG

- Legen Sie das Wärmekissen wie eine Weste an. Der Schalter soll sich stets in Ihrer Hand befinden bzw. gut erreichbar und auffindbar sein. Kontrollieren Sie dessen Lage regelmäßig.
- Schließen Sie den Klettverschluss für den Nackenbereich und befestigen Sie das Wärmekissen mit dem elastischen Verschluss (je nach Körpergröße im Hüftbereich oder Brustbereich).
- Verbinden Sie erst die Steckverbindung des Anschlusskabels mit der Anschlussbuchse an dem Wärmekissen (siehe Abbildung).

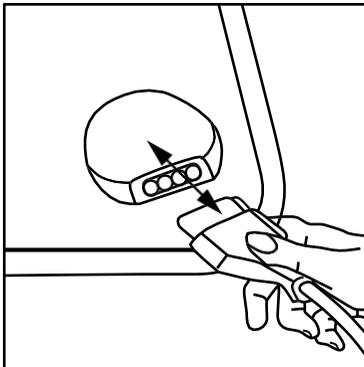

# WOOLWORTH®

- Verbinden Sie erst dann den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose in Ihrer Nähe.
- Stellen Sie mit dem + bzw – Wärmestufenreglerlasten auf die gewünschte Wärmestufe 1 bis 6. Die Kontrolllampe leuchtet in der gewählten Stufe auf und zeigt an, dass das Wärmekissen in Betrieb ist.

**Wärmestufen:**

0 = Aus

1 = minimale Wärme

6 = maximale Wärme

**Das Produkt benötigt je nach Wärmestufe ca. zwischen 15 - 30 Minuten Aufwärmzeit.**

- Nach Ablauf der Aufwärmzeit gibt das Wärmekissen eine angenehme Wärme ab.
- **Timer:**  
Nach ca. 90 Minuten schaltet das Wärmekissen automatisch ab. Um es wieder in Betrieb nehmen zu können, müssen Sie den Schalter zuerst auf die "0" Position schieben und ca. 10 Sekunden warten. Erst dann wieder in die gewünschte Temperaturstufe zum Wiedererwärmen einschalten.  
**Nach Gebrauch schalten Sie das Wärmekissen aus (Wärmestufe 0) und ziehen den Netzstecker.**

**REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG**

**Achtung Stromschlaggefahr!**

Produkt, Bedienteil, Netzkabel und Netzstecker dürfen wegen der Gefahr eines elektrischen Schlages nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.



In handwarmem Wasser mit neutralem Wollwaschmittel waschen.



Sanfte Maschinenwäsche bei max. 40°C



Nicht bleichen



Nicht im Wäschetrockner trocknen



Nicht in die Reinigung geben



Nicht bügeln

**WOOLWORTH®**

Bevor Sie das Nacken-& Rückenpolster reinigen, ziehen Sie den Netzstecker und lassen das Gerät mind. 10 Minuten abkühlen. Das Nacken-& Rückenpolster ist mit einer abnehmbaren Bedieneinheit ausgestattet. Trennen Sie die Bedieneinheit von der Wärmeunterdecke, indem Sie das Verbindungskabel aus dem Stecker an dem Nacken-& Rückenpolster ziehen. Das Nacken-& Rückenpolster dürfen Sie bei 40°C Schonwäsche in der Maschine oder sanft per Handwäsche reinigen. Am besten legen Sie das Nacken-& Rückenpolster in eine Badewanne mit handwarmem Wasser und etwas Feinwaschmittel und drücken es sanft aus. Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel oder starke Bürsten. Lassen Sie das Nacken-& Rückenpolster nach der Wäsche ausgebreitet auf einer flachen Unterlage trocknen. Benutzen Sie die Nacken-& Rückenpolster erst wieder, wenn es vollkommen trocken ist. Bewahren Sie die Nacken-& Rückenpolster ausgebreitet liegend ohne zusätzliche Auflagen an einem sauberen und trockenen Platz auf.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts	
	Das Produkt muss per Gesetz zur Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgegeben werden, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten. Informationen erhalten Sie bei Ihrer Stadt & Gemeindeverwaltung.

EU-HP2421(63x42) 220-240V ~ 50/60Hz 100W	  
WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna	